

# HIFU Shaper


- Jedinstveni ultrazvučni uređaj visokog intenziteta (HIFU) koji je idealno rješenje za zatezanje kože
- Prirodno podiže i zateže kožu iznad obrva, područje brade i podbradka, vrata i područje dekolta
- Uređaj stimulira proizvodnju novog kolagena putem usmjerene energije koju dobivamo iz ultrazvuka
- HIFU stimulira područja epidermisa, dermisa i hipodermisa, bez štetnih posljedica na koži
- Jednostavno, sigurno i neinvazivno liječenje
- Uređaj se sastoji od korisničkog sučelja s velikim LCD zaslonom koji je osjetljiv na dodir (touch screen).



## APLICIRANJE

- Podizanje i zatezanje kože
- Pomlađivanje
- Podizanje obrva
- Uklanjanje bora
- Podizanje linije čeljusti
- Smanjenje podbradka (i do dva puta manji podbradak)

1.5 mm Uložak za epidermis	Zgornji dermis
3.0 mm Uložak za dermis	Spodnji dermis
4.5 mm Uložak za hipodermis	SMAS Mišićna plast

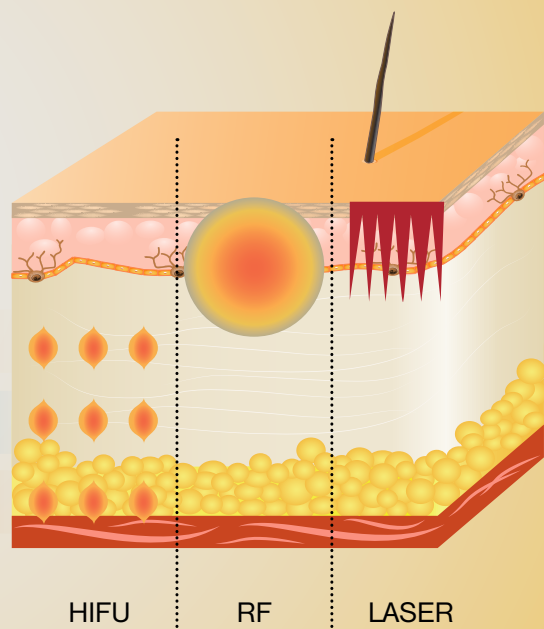

## RAD UREĐAJA:

HIFU ultrazvuk usmjerava energiju u žarišne točke duboko u koži, bez oštećenja površine kože (gornji epiderm) ili regije ispod kože. Zagrijavaju se žarišne točke i na taj način se potiče i olakšava proizvodnja novog kolagena, bez utjecaja na okolno tkivo.



## TRETIRANA PODRUČJA



HIFU Shaper prestige

### Tehnički podaci:

Ime uređaja:	HIFU Shaper	HIFU Shaper prestige
Šifra:	1800532	1800540
Energija:	0.1 – 2 J	
Uložak:	1.5 mm dubina prodora - 10 MHz 3.0 mm dubina prodora - 7 MHz 4.5 mm dubina prodora - 4 MHz	
Razmak između točaka:	2 mm / 3mm / 4 mm	
Dužina :	30 mm (prilagodljivo 10 mm / 20 mm / 30 mm)	
Voltaža:	230V~50Hz	
Dimenzije (LxWxH):	43 x 60 x 26 cm	47 x 60 x 27 cm
Težina :	12 kg	13 kg
Klasifikacija IEC 60601-1:	Klasa I, Tip BF	
Klasifikacija MDD 93/42/EEC:	Klasa IIb	

### Osnovni set & opcije:

Aplikator HIFU	količina
Uložak 3.0 mm - 7 MHz (1500111)	1
Uložak 4.5 mm - 4 MHz (1500112)	1
Glavni kabel	1
Priručnik za korištenje	1
Uložak 1.5 mm - 10 MHz (1500113)	1
Kolica Green Eco (4900281)	Po izboru
Voziček Green Eco (4900281)	Po izboru

#### DISTRIBUTER:

- **GimMed d.o.o.**, Kneza Višeslava 3, 10 000 Zagreb, **T:** +385 (0)1 5621400, **M:** +385 (0)95 442 0732, **F:** +385 (0)1/3769444, **W:** www.medest.eu  
- **MEL - SERVIS, Dragutin Sbüll**, Kumičića 47, 42000 Varaždin, **T:** +385 (0)42 203 954, **F:** +385 (0)42 233 952, **M:** 098 446 326  
- **ARK d.o.o.**, Medical & Wellness equipment, Kolodvorska 11a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, **T:** +387 33 615 903, **F:** +387 33 611 655, **M:** +387 61 138 575, **E:** info@ark.ba, **W:** www.ark.ba

#### PROIZVOĐAČ:

Iskra Medical d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana  
Office: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenia  
**T:** +386 4 53 25 760, +386 4 53 25 762  
**F:** +386 4 53 25 718, **M:** +386 41 622 918  
**E:** info@iskramedical.eu, **W:** www.iskramedical.eu

